




SPOSÓB NA ZDROWSZE ŻYCIE

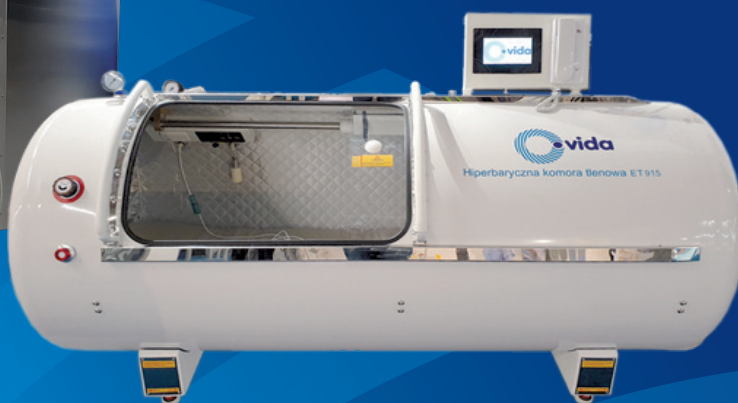

Hiperbaryczne komory tlenowe

JAK DZIAŁA HIPERBARYCZNA TERAPIA TLENOWA?

Tlenoterapia hiperbaryczna jest efektywną metodą dostarczania tlenu do wszystkich organów i tkanek organizmu. Wpływa pozytywnie na kondycję psychofizyczną, wydolność organizmu, wygląd, przyspiesza procesy regeneracyjne oraz jest skutecznym sposobem leczenia wielu chorób.



KOMORA HIPERBARYCZNA JEDNOOSOBOWA (TWARDA) – ET715



Komora hiperbaryczna zapewniająca komfortową terapię w pozycji leżącej.

- Ciśnienie: 1,5 ATA (50 kPa).
- Wykonana ze stali.
- Wymiary: długość 220 cm, średnica 75 cm.
- Waga: ok. 150 kg.
- Koncentrator tlenu: 10 l/min.
- Kompresor.
- Schładzacz.

KOMORA HIPERBARYCZNA DWUOSOBOWA (TWARDA) – ET915

Komora hiperbaryczna zapewniająca komfortową terapię w pozycji leżącej.

- Ciśnienie: 1,5 ATA (50 kPa).
- Wykonana ze stali.
- Wymiary: długość 220 cm, średnica 90 cm.
- Waga: ok. 170 kg.
- Koncentrator tlenu: 10 l/min.
- Kompresor.
- Schładzacz.



Oferujemy komory hiperbaryczne zaprojektowane z myślą o:

- indywidualnych użytkowników,
- klinikach i gabinetach rehabilitacyjnych,
- ośrodkach i klubach sportowych,
- siłowniach, klubach fitness i wellness,
- gabinetach odnowy biologicznej i SPA,
- gabinetach kosmetycznych,
- hotelach i pensjonatach.

KOMORA HIPERBARYCZNA LEŻĄCA (MIĘKKA) 1.5 ATA – ES715



Komora hiperbaryczna zapewniająca terapię w pozycji leżącej.

- Ciśnienie: 1,5 ATA (50 kPa).
- Wykonana z poliuretanu termoplastycznego.
- Wymiary: długość 225 cm, średnica 70 cm.
- Waga: 30 kg.
- Koncentrator tlenu: 10 l/min.
- Kompresor.
- Schładzacz.

Komora posiada wewnętrzny, metalowy stelaż, zgrzewane szwy oraz 3-zamkowy system zamykania zapewniający szczelność komory.

KOMORA HIPERBARYCZNA LEŻĄCA (MIĘKKA) – ES900

Komora hiperbaryczna zapewniająca terapię w pozycji leżącej.

- Ciśnienie: 1,3 ATA (30 kPa).
- Wykonana z poliuretanu termoplastycznego.
- Wymiary: długość 225 cm, średnica 90 cm.
- Waga: 30 kg.
- Koncentrator tlenu: 10 l/min.
- Kompresor.
- Schładzacz.

Komora posiada wewnętrzny, metalowy stelaż, zgrzewane szwy, 2 lub 3-zamkowy system zamykania zapewniający szczelność komory.



KOMORA HIPERBARYCZNA PÓŁLEŻĄCA (MIĘKKA) – ES100



Komora hiperbaryczna zapewniająca komfortową terapię w pozycji półleżącej lub siedzącej. Umożliwia swobodne czytanie, pracę na komputerze oraz oglądanie filmów.

- Ciśnienie: 1,3 ATA (30 kPa).
- Wykonana z poliuretanu termoplastycznego.
- Wymiary: długość 170 cm, wysokość 110 cm, szerokość: 70 cm.
- Waga: 30 kg.
- Koncentrator tlenu: 10 l/min.
- Kompresor.
- Schładzacz.

Komora posiada wewnętrzny, metalowy stelaż, zgrzewane szwy (bez toksycznych klejów), wygodny fotel wewnętrzny oraz 3-zamkowy system zamykania, zapewniający szczelność komory.



KOMORA HIPERBARYCZNA WIELOOSOBOWA – KW230

Wielosobowa komora hiperbaryczna KW230 umożliwia dowolną aranżację wnętrza. Może zostać wyposażona w 4-5 miejsc siedzących, sprzęt rehabilitacyjny lub sportowy (np. rowerki stacjonarne, steppery, itp.).

- Ciśnienie 1,5 ATA z możliwością zmiany na 1,3 ATA.
- Podjazd dla wózków inwalidzkich.
- Indywidualne maski tlenowe dla każdego pacjenta z możliwością blokady wypływu tlenu z masek nieużywanych.



Konstrukcja komory umożliwia wprowadzenie pacjentów na wózkach inwalidzkich lub noszach.

Budowa modułowa umożliwia łatwy transport i instalację komory w pomieszczeniu o powierzchni minimalnej 30 m² oraz wysokości co najmniej 280 cm.

Wymiary komory:

- średnica wewnętrzna 230 cm,
- wysokość wewnętrzna 180 cm,
- szerokość drzwi 80 cm,
- wysokość drzwi 160 cm,
- łączna masa około 1400 kg.


Pomiar parametrów wewnątrz komory:

- ciśnienia wewnątrz komory,
- wilgotności względnej powietrza,
- temperatury,
- stężenia tlenu.



Wyposażenie:

- Koncentratory tlenu o łącznej wydajności około 40l/min mieszanki oddechowej o zawartości około 90 % tlenu.
- Kompresory o łącznej wydajności około 148 l/min.
- Dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem LCD.
- Schładzacz powietrza.
- System monitorowania – kamera wewnętrzna oraz zewnętrzny monitor LCD.
- System komunikacji głosowej (intercom) pozwalający na kontakt głosowy osób przebywających w komorze z obsługą.
- Dzwonek alarmowy pozwalający przywołać obsługę.
- Zawory awaryjnej dekompresji komory.
- System obniżenia ciśnienia ze standardowego 1,5 ATA do 1,3 ATA.
- Oświetlenie LED-owe.
- Maski tlenowe wielokrotnego użytku, 10 szt.

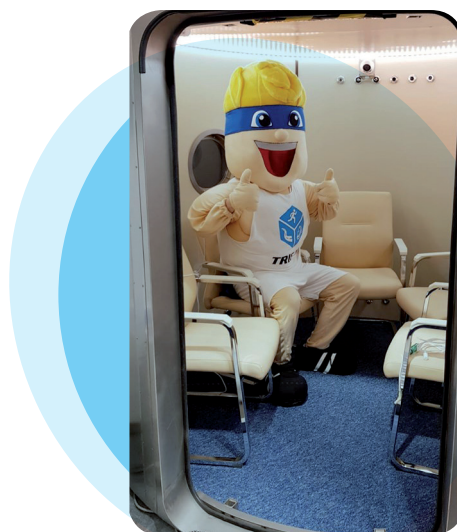

OVIDA Sp. z o.o., ul. Dojazdowa 54, 44-100 Gliwice
tel.: +48 32 428 16 88, tel. kom.: +48 720 836 777
www.ovida.pl kontakt@ovida.pl

